

INNOVATION
MADE BY GEUDER®


IOL HAPTIK EXPANDER

n. DICK



G-18919 **IOL HAPTIK EXPANDER** n. DICK

zur Enklavation von irisfixierten
Linsen (Artiflex / Veriflex;
Artisan / Verisyse)

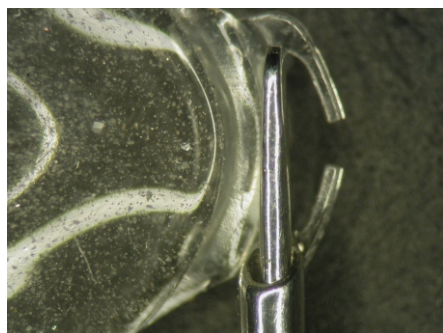

NEU

Der Expander wird mit offenen Griffteilen in das Auge eingeführt und zwischen der Linsenhaptik eingesetzt.

Durch Zusammendrücken des Instrumentengriffs wird die Haptik gespreizt und kann an der Iris fixiert werden.

Prof. Dr. med. Burkhard Dick
Direktor der Universitäts-Augenklinik, In der Schornau 23-25, 44892 Bochum

DESIGNED BY
Prof. Dr. med. BURKHARD DICK

Geuder®
Precision made in Germany

GEUDER AG
Hertzstrasse 4
69126 Heidelberg
Germany

Tel: 06221 3066
Fax: 06221 303122
info@geuder.de
www.geuder.de